

# **ALMOHADILLA ELECTRICA**

## **USER MANUAL**

**Model: MP-HP210**

**Size: 42x32cm**

**Rated Voltage: 220-240V~ 50Hz**

**Rated Power: 100W**



**INSTRUCCIONES**

**GUARDE PARA EL FUTURO**

**LEA EL MANUAL ANTES DE SU PRIMER USO**

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños materiales, se deben seguir las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

Lea detenidamente el manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas. Asegúrese de comprender el funcionamiento y el manejo de la manta eléctrica antes de usarla.

Desconecte siempre la alimentación de la toma de corriente antes de enchufar o desenchufar. Desconéctelo tirando del enchufe, no del cable.

Desconecte la alimentación y desconecte el enchufe cuando no utilice la almohadilla térmica o antes de limpiarla.

Utilice siempre la almohadilla térmica en una toma de corriente con el voltaje (solo CA) indicado en la etiqueta de características.

Utilice únicamente el tipo de controlador indicado en la etiqueta de características.

No la utilice si está húmeda o mojada.

La almohadilla térmica no es un producto médico; no está diseñada para uso médico en hospitales, clínicas, etc.

No la utilice junto con otro aparato de calefacción.

Al utilizarla, asegúrese de que la almohadilla térmica y los cables de alimentación no queden atrapados. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

Examine la almohadilla térmica con frecuencia para comprobar que no presente signos de desgaste o daños. Si detecta algún daño o desgaste, no utilice la almohadilla térmica y consulte a un especialista.

Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, solo debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.

El aparato debe devolverse al fabricante o a su servicio técnico si la conexión se ha roto.

Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor ni por personas muy vulnerables que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento. Los niños menores de tres años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar al sobrecalentamiento.

Las instrucciones deben indicar que el aparato no debe ser utilizado por niños pequeños a menos que los controles hayan sido preconfigurados por un padre o tutor y que el niño haya recibido instrucciones adecuadas sobre cómo utilizarlos de forma segura.

El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 3 años y menores de 8 años bajo supervisión y con el control siempre configurado al mínimo de temperatura.

El cable y la unidad de control del aparato pueden presentar riesgos de enredos, estrangulación, tropiezos o pisadas si no se colocan correctamente. El usuario debe asegurarse de que las ataduras y los cables eléctricos sobrantes se coloquen de forma segura.

## **USO DE LA ALMOHADILLA**

Conecte el controlador al pad: sujete el conector con una mano y empújelo hasta el fondo.

Asegúrese de que haya una toma de corriente cerca y de que, al usarlo, el cable de alimentación no esté en una posición que pueda causar tropiezos. Una vez conectado a la red eléctrica, el controlador debe estar al alcance del usuario.

No cubra el controlador ni ejerza presión sobre él.

**Para el controlador KS6**



## ● Application methods

1.141 / 5.000

- Presione la tecla "ON/OFF" durante 3 segundos para encender; el controlador emitirá tres pitidos. Configure el precalentamiento en la posición más alta del grifo, "6", 10 minutos antes de usarlo. b. Al encenderlo por primera vez, la temperatura se mostrará en 3. Presione la tecla "Temp" y la posición del grifo de temperatura será 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1 es el nivel bajo y 6 es el nivel alto. Al usarlo, seleccione la posición del grifo adecuada según sus necesidades. Si lo va a usar durante un tiempo prolongado, colóquelo en la posición "1", que es la más baja, para evitar el sobrecalentamiento que podría causar molestias. c. Función de apagado automático que apaga el controlador después de 90 minutos. d. Presione la tecla "ON/OFF" durante 3 segundos para apagarlo al dejar de usarlo. Para retirar el controlador, simplemente sujete el enchufe con una mano y tire del conector directamente. ADVERTENCIA: NO deje el control remoto debajo, envuelto ni sobre el pad mientras esté encendido. Si deja el pad encendido, déjelo completamente abierto sobre una superficie plana. PRECAUCIÓN: No deje el pad doblado ni arrugado mientras esté encendido.

## Troubleshooting Table

| Error Code | Cause                                                                                                                                                                  | Solution                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C          | The controller has been placed under or inside the pad and it has overheated. As a safety measure, the heating pad has turned off.                                     | Turn the controller off, unplug the heating pad, lay it down completely flat and leave to cool down. Then restart the controller.                          |
| P          | Possible that the controller or coupler is not connected properly.                                                                                                     | Turn the controller off, unplug the heating pad. Ensure the controller and or connector are connected properly. Plug it back into power and use as normal. |
| E          | The pad has been used while folded or crumpled and it has overheated. As a safety measure, the heating pad has turned off.                                             | Turn the controller off, unplug the heating pad, lay it down completely flat and leave to cool down. Then restart the controller.                          |
| No display | The pad has been used while seriously folded or crumpled and it has overheated, the heating element has been damaged. The controller blown the Over-Temp thermal fuse. | Need to be scrapped.                                                                                                                                       |

## DESPUES DE USO

Cuando no utilice la almohadilla térmica, apague el controlador y desenchúfela de la toma de corriente. Si no va a utilizar la almohadilla térmica durante un periodo prolongado, guárdela en un lugar fresco y seco.

Si desea dejar de usar la almohadilla térmica, apáguela y desenchúfela de la toma de corriente. Tire siempre del enchufe, no del cable.

## **WARNING - risk of burns - ADVERTENCIAS**

El uso prolongado en la configuración más alta puede provocar quemaduras.

Para evitar quemaduras en la piel, pruebe la temperatura antes de usarla con el dorso de la mano (no con la palma, ya que es menos sensible que otras partes del cuerpo).

No utilice la almohadilla térmica directamente sobre la piel.

## **LIMPIEZA Y GUARDADO**

Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el conector de la toma del dispositivo antes de limpiar la almohadilla térmica.

Ni la unidad de control ni el cable de alimentación deben entrar en contacto con humedad, agua ni ningún otro líquido, ya que existe peligro de descarga eléctrica. Además, la almohadilla térmica no debe estar húmeda durante su uso. Úsela solo cuando esté seca, ¡nunca húmeda!

Deje que la almohadilla térmica se enfríe antes de plegarla.

¡No coloque objetos pesados sobre la almohadilla térmica!

¡La almohadilla no debe estar arrugada!

Guarde siempre la almohadilla térmica en un lugar fresco y seco, protegido de otras fuentes de calor.

## Reciclado

- **Reciclaje adecuado:**

Los electrodomésticos contienen componentes que pueden ser peligrosos para el medio ambiente si no se gestionan correctamente. Los puntos limpios aseguran que estos materiales se reciclen de manera adecuada.


- **Prevención de la contaminación:**

Tirar electrodomésticos a la basura común puede causar contaminación, especialmente por los líquidos que contienen.

- **Cumplimiento de la ley:**

La ley obliga a reciclar los electrodomésticos en puntos limpios, y tirarlos a la basura puede acarrear multas.

## Disposal -

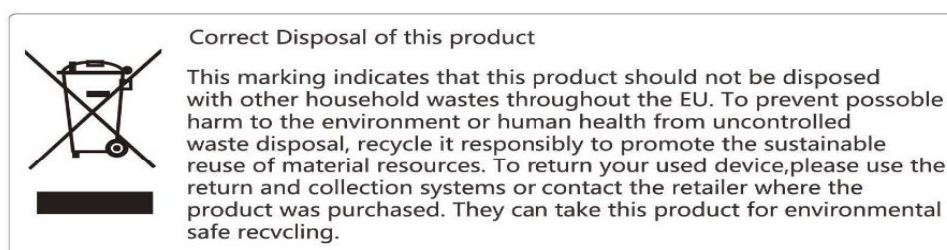

## SYMBOL EXPLANATION



Read the instructions for use



Maximum washing temperature 40°C, mild process



Do not dry clean



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron



Do not insert pins



Do not use folded or rucked



Not to be used by very young children (0-3 years)